

TOMY 灭菌锅—您灭菌设备的最佳选择

目前市场上灭菌锅的品牌鱼龙混杂，在众多品牌中，来自日本专业灭菌设备制造商 TOMY Digital Biology 的 SX 系类高压灭菌锅，以先进的设计理念、时尚的外观、卓越的性能、出色的品质赢得千万用户信赖。



对于高压蒸汽灭菌操作，保证用户的使用安全是第一位的。TOMY 高压灭菌锅拥有六大安全屏障：

➤ **1、电导低水位传感器**

在水位低于一定值时会自动报警，避免加热圈干烧对锅体带来致命的伤害。

➤ **2、过热保护系统**

在电导水位传感器失效的情况下保护加热圈。

➤ **3、4 合 1 安全锁系统**

盖子互锁+盖门探测+压力探测+温度探测，100%保证用户安全。

盖门微动开关—自动探测盖子闭合，保证系统安全性压力。

➤ **4、防护挡板**

可有效防止剩余蒸汽喷向操作者身体，保护操作者安全。

➤ **5、温度探测系统**

温度双向测试—保证在温度降低到开盖温度，压力降低到 0 之前


天美(中国)科学仪器有限公司
北京市朝阳区天畅园7号楼(100107)

t 010-64010651
f 010-64060202
e techcomp@techcomp.cn
w www.techcomp.cn

，盖子无法强制打开。

➤ **6、ST-ZERO 废弃物灭菌盒**

不锈钢一体废弃物灭菌盒，轻松实现待灭菌样品和器具从生物安全柜到灭菌锅之间的转移，有效防止致病气溶胶外散，安全可靠。

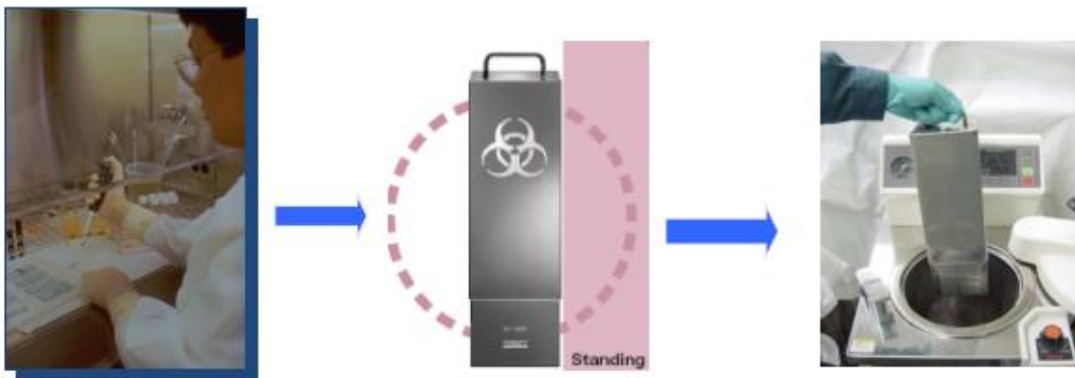

TOMY 灭菌锅脚踏开关上掀盖、2 级强制制冷风扇、5 级排气调节、定时预约功能等设计特点均体现着快速、高效、便捷的理念，使用户在最短时间内达到最好的灭菌效果。

相信 TOMY SX 系列高压灭菌器一定是您实验室灭菌工作中的得力助手。如欲了解更多详情，欢迎随时联系天美（中国）科学仪器有限公司。